



www.kidsmed.ee

KIDSMED



TermoPlus

Kontaktivaba infrapuna termomeeter



- ▶ Ära mõõda temperatuuri pliidi või konditsioneeride lähedal.
Ära kausta termomeetrit õues.



WAIT 30 Minutes

- ▶ Kui on märkimisväärne muutus ümbritsevas temperatuuris, siis hoia termomeetrit vähemalt 30 minutit ruumis enne kasutamist.



Kui termomeetrit ei ole üle 3-kuu kasutatud, siis eemalda patareid.
Patareid võivad lekkida ja seadme rikkuda.

Termomeeter vastab järgnevatele rahvusvahelistele regulatiividele ja ohutusstandarditele:
ISO 13485:2016, ISO 14971:2012, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1-11:2015,
ISO 80601-2-56:2017, IEC 60601-1-2:2014, EN 1041:2008

Toote omadused

LCD valgus pimedas ruumis ja digitaalne LCD ekraan

Multifunktsionaalne temperatuuri mõõtmine - kehalt, ruumist, toidult.

Salvestab viimased 32 mõõtmistulemust

Lihtsa ja mugava disainiga


Energiasäästlik - lülitub automaatselt välja minuti möödumisel

Töötab 2 x AA patareidega.

Tootele kehtib 1-aastane garantii alates ostu kuupäevast.

Tegemist on meditsiiniseadmega.

Toote kirjeldus

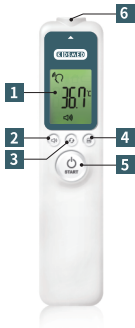

- 1 LCD display
- 2 Heli (on/off)nupp
- 3 Režiimi nupp
- 4 Mälu nupp
- 5 Start nupp (tööle panemine ja mõõtmine)
- 6 Andur

Nupp Funktsioon



Seadme tööle panemine. Mõõtmise alustamine.



Heli seadistamine (on/off)




Mõõtmismeetodi valimine



Mõõtmismeetodi kinnitamine. Mõõtmistulemuste vaatamine (max 32).

Ekraan

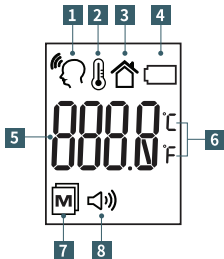





- 1** Keha temperatuuri režiim
- 2** Objekti temperatuuri režiim
- 3** Ruumi temperatuuri režiim
- 4** Madala akutaseme sümbol
- 5** Mõõdetav temperatuur
- 6** Mõõtühikud (Celsius, Fahrenheit)
- 7** Mälu
- 8** Heli sisse/välja

Enne kasutamist



- Enne kasutamist pange seadmesse patareid.

Termomeetri tööle panek ja seadistamine





- Vajutage õrnalt Start nuppu  või režiimi nuppu 
 - > Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade kasutusvalmis. 
 - > Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim 
 - > Kui seadet ei kasutata minuti jooksul, siis lülitub see automaatselt välja.

Seadme välja lülitamiseks: vajutage  umbes 4-5 sekundit





Mõõtühiku muutmine (°C/°F)

- Vajutage  3-4 korda, et vahetada mõõtühikut. Kui sobiv mõõtühik on valitud (C või F), siis vajutage  et soovitud valik kinnitada.

Heli seadistamine

- Vajutage õrnalt  nupule.
 - > Iga kord kui antud nuppu vajutate, heli lülitub sisse või välja
 - > Kui ekraanil on nähtav , siis nupule vajutades avaldub heli.
 - > Kui ekraanil ei ole nähtav , siis nupule vajutades heli ei avaldu.
 - > Termomeetrit tööle pannes on vaikimis alati heli sisse lülitatud. 

Keha temperatuuri mõõtmine

- Vajutage õrnalt Start nuppu  või režiimi nuppu 
 - > Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade on kasutusvalmis. 
 - > Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim 
- Hoidke termomeetrit 1-2cm kaugusel mõõdetavast kohast. Ideaalne mõõtmiskoht on märgitud pildil. Hoidke nuppu ca 2 sekundit all kuni ekraanile ilmub mõõdetav temperatuur.



Ekraani 3 värvitooni





Roheline: 22°C-37.3°C

Kollane: 37.4°C-37.9°C

Punane: kõrgem kui 38°C/ madalam kui 22°C









Mõõtmistulemuste kuvamine

- Vajutage õrnalt Start nuppu  või režiimi nuppu 
 - > Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade on kasutusvalmis.
 - Termomeeter salvestab automaatselt viimased 32 mõõtmistulemust.
 - Vajutage . Termomeeter kuvab ekraanile viimased mõõtmistulemused.
 - Iga uuesti vajutamine  nupule toob ekraanile eelneva mõõtmistulemuse.
- Termomeeter salvestab üksnes kehatemperatuuri mõõtmistulemused.



Objekti temperatuuri mõõtmine

- Vajutage õrnalt Start nuppu  või režiimi nuppu 
 - > Pärast paari sekundit ilmuvad ekraanile ikoonid ja seade kasutusvalmis.
 - > Seadme käivitamisel on alati vaikimis keha temperatuuri mõõtmise režiim 
- Vajutage õrnalt  nuppu
 - > Seade lülitub ümber objektilt mõõtmise režiimile. 
 - > Režiimi kinnitamiseks vajutage 
- Hoidke termomeetrit 1-2cm kaugusel mõõdetavast kohast.



Termomeeter ei salvesta objekti mõõtmistulemusi





Ruumi temperatuuri mõõtmine

- Ruumi temperatuuri mõõtmiseks tuleb valida  ikoon.
- Vajutage õrnalt  nuppu kuni
 - > Seade lülitub ümber ruumi mõõtmise režiimile. 
 - > Režiimi kinnitamiseks vajutage 



Termomeeter ei salvesta ruumi mõõtmistulemusi

Veateated


Ekraan	Veateate kirjeldus	Tõrkeotsing
	<p>Mõõdetud temperatuur ei ole lubatud temperatuuri vahemikus. Lubatud temperatuuri vahemik: 16°C - 40°C</p>	<p>Lase termomeetril seista umbes 30 minutit ja seejärel proovi uuesti.</p>
	<p>Mõõdetud temperatuur on liiga kõrge (Hi) või liiga madal (Lo).</p>	<p>Kehatemperatuuri mõõtmisvahemik: 22°C - 42.5°C Objekti temperatuuri mõõtmisvahemik: 0°C - 100°C</p>
	<p>Patarei on tühi.</p>	<p>Vahetage patareid. Pärast patareide vahetust ilmub ekraanile hetkeks:</p> 

Patareide vahetamine

Seadmele sobivad AA patareid (2tk).

- Avage patarei korpus lükates seda alla poole (1)
 - Võtke välja vanad patareid ja asendage uutega.
 - Jälgige, et patareid oleks seadmesse pandud õiget pidi.
- Sulgege korpus.

Kasutatud patareisid ei tohi visata tava prügikasti.
Patareid tuleb viia kogumiskasti või jäätmejaama.

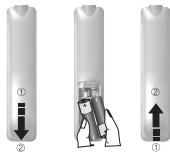

Hooldus

- Termomeetri sensor on väga tundlik, mistõttu tuleb hoida see pidevalt puhas ning vältida kahjustada saamist.
- Ära pane midagi anduri peale
- Sensori puhastamiseks kasutada puuvillast alkoholiga riidelappi. (Puhastamiseks sobib ka Kidsmedi toode Puhtad pinnad).
- Vältida seadme jätmist otsese päikesevalguse kätte. Hoiustada puhtas ja tolmuvabas kohas.
- Ruumi temperatuur peaks olema 16°C - 40°C

⚠ Jälgi, et termomeeter ei kuku maha.

⚠ Termomeeter ei tohi puutuda kokku veega ega muu vedelikuga.

⚠ Ära paranda ega ava termomeetri korpust iseseisvalt. Vastasel juhul ei kehti tootele garantii.