

## Termoplus infrapuna kontaktivaba termomeeter

### 1. Termomeeter näitab erivaid tulemusi võrreldes kaenla alt mõõdetud termomeetriga.


Jah, see on täiesti normaalne. Kaenlaalune ja oimukohalt mõõdetud temperatuurid ongi erinevad, kuni 0.5 kraadi. Samuti on erinevad temperatuurid vasakul ja paremal pool pead (ka mõlema kaenlaaluse temp on erinevad). Aga millise kehaosa temperatuuri ma siis palavikuna võtan? Selle, millelt sa parasjagu mõõdad. Kui sa oled valinud endale temperatuuri mõõtmiseks kontaktivaba termomeetri, siis mõõdad vaid sellega. Arusaadav, kui esimesel korral ikka tahad kontrollida, kas seade töötab. PS! Selleks aga tee endale esmalt selgeks temperatuuri erinevuste vahe kohtadelt, kus mõõdad.

Kui sa oled valinud endale kõige mugavamaks temperatuuri tuvastamise vahendiks just Kidsmed Termoplus kontaktivaba termomeetri, siis mõõdagi vaid sellega. Kui aga vajad arstiga konsulteerimist, siis tuleks arstile mainida, millisel kehaosalt on temperatuur mõõdetud.

### 2. Temperatuur ei ole korrektne.

Palun kontrollige, et mõõtekoht oleks korrektne (vt. Joonist). Veendu, et mõõdetav koht oleks kuiv (mitte higine), sest niiske naha temperatuur on madalam kui kuiva oma ja temperatuuri ei tohiks mõõta ka kohe pärast õuest tulemist või füüsiliselt aktiivne olemist, vaid vähemalt pool tundi hiljem, kuid enne palavikku vähendavate ravimite tarvitamist (see kehtib ka nt kaenlaaugust mõõtes). Seadme ja naha vahele ei tohiks jääda näiteks juukseid. Samuti ärge mõõtke sealt poolt pead, mida on toetatud vastu patja vms.

Mõõtmiste vahel oleks soovitatav teha ca 5 minutiline paus ning mõõta uuesti samalt poolt pead. Nii nagu on kaenlaalustega, on ka oimukohtadel erinev temperatuur.

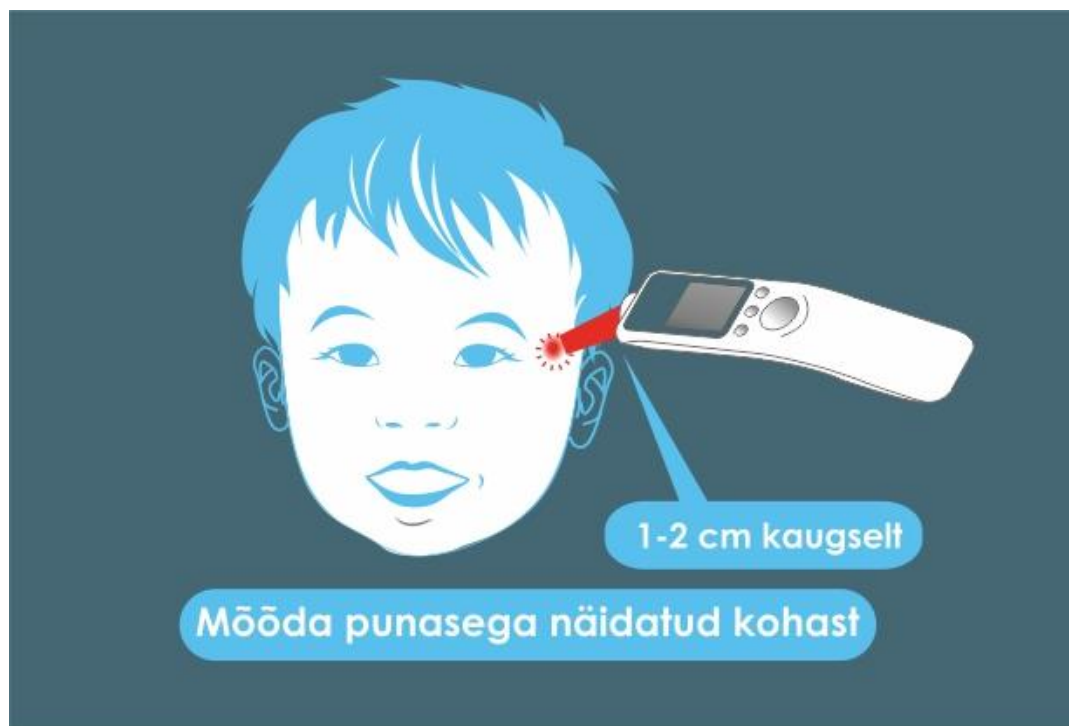

### **3. Üritan mõõta toa või eseme temperatuuri aga see ei ole korrektne või liigub režiim automaatselt tagasi kehatemperatuuri mõõtmise režiimi.**

Seade on automaatselt kehatemperatuuri režiimil peale sisse lülitamist. Kui olete valinud ruumi või objekti režiimi ning vastav ikoon on ilmunud ekraanile, tuleb see fikseerida vajutades nupule M. Peale seda saate mõõtmisega alustada. Kui te valikut ei kinnita, liigub see automaatselt kehatemperatuuri mõõtmise režiimile.

### **4. Seadme ekraanil on tähis Lo ning mõõta ei ole võimalik.**

Palun võtke seadme patareid välja ning oodake 10 minutit. Sisestage patareid ning proovige uuesti. Vahetage patareid uute vastu  
Kui siiski on tulemus sama, võtke meiega ühendust [info@kidsmed.ee](mailto:info@kidsmed.ee)

### **5. Kui pikk on Termoplus garantii?**

Termoplusile kehtib 1-aastane garantii.

### **6. Kui ma ei ole seadmega rahul, kas saan selle tagastada?**

Taganemise tingimustega tutvuge siin: <https://kidsmed.ee/muugitingimused>

### **7. Kui olen seadme pakiautomaadist kätte saanud, kas peaksin enne kasutamise alustamist midagi silmas pidama?**

Kui olete toote võtnud pakiautomaadist välja ning koju toonud, siis võtke seade karbist välja ning laske sel 30 minutit toatemperatuuril seista.